

DE/3

Compressori d'aria
per uso medico
*Air compressors for
medical applications*



Autolubrificati
Oilless

Bassa rumorosità
Low noise level

Aria compressa fino a 5 riuniti
Compressed air for up to 5 dental chairs

Aria trattata
Treated air

Serbatoi con verniciatura interna
Tanks with internal coating

I compressori FIAC per uso medicale sono una centrale di aria compressa consigliata a chi deve lavorare in un ambiente particolarmente depurato e deve salvaguardare la salute sia degli operatori sanitari che dei pazienti. La necessità è di garantire una quantità d'aria sufficiente alle apparecchiature collegate al compressore e di fornire aria pulita e senza tracce di umidità. I gruppi pompanti ad alta efficienza utilizzati nei nostri compressori garantiscono la totale assenza di residui oleosi che potrebbero danneggiare le apparecchiature e, cosa ancor più grave, creare problemi alle persone esposte al contatto di aria compressa contaminata.

Inoltre, quando la collocazione del compressore è in prossimità degli strumenti ad esso collegati, è indispensabile limitare il livello di rumorosità.

Per tali esigenze è possibile scegliere i compressori silenziati che, attraverso una particolare carenatura in materiale fonoassorbente, garantiscono un livello di pressione sonora inferiore a 65 dB(A) pur mantenendo efficiente il sistema di ventilazione e raffreddamento del gruppo pompante. Per salvaguardare la rete di distribuzione e le apparecchiature alimentate ad aria compressa è stato montato su alcuni modelli di compressori un essiccatore ad adsorbimento che consente l'eliminazione della condensa presente.

La tecnologia utilizzata e la qualità dei compressori per uso medicale sono il frutto di un'analisi concreta e mirata delle esigenze delle utenze moderne; il risultato sono dei compressori per uso medicale affidabili, di semplice utilizzo, con minimi costi di manutenzione e soprattutto che producono aria pura.

FIAC medical compressors offer a full compressed air system in one single installation that is recommended for those working in particularly pure environments, where the health and safety of both medical staff and patients must be safeguarded.

The need to guarantee a sufficient amount of air to the equipment connected to the compressor and to supply clean and perfectly dry air.

The highly efficient pumping units used in our compressors guarantee the total absence of oily residues, which could damage the equipment and, even worse, create problems for those exposed to contaminated compressed air.

What's more, the level of noise must also be restricted when the compressor is positioned near the instruments to which it is connected.

We do indeed offer silent compressors which, thanks to their special soundproof panelling, guarantee an acoustic pressure level below 65 dB(A), without affecting the efficiency of the ventilation and cooling system of the pumping unit.

To safeguard the distribution line and the equipment supplied with compressed air, some models of compressors are equipped with an adsorption drier that eliminates problems of condensation.

The technology exploited and the quality of the medical compressors manufactured are the outcome of specific research and analysis aimed at the requirements of modern facilities. The final result ensures compressors for medical use that are reliable and simple to use, plus they offer minimised maintenance costs but above all they produce pure air.




Compressori d'aria per uso medicale

Air compressors for medical applications



Gruppo pompante - Pump unit

- ① Filtro aria in materiale antiurto / Air filter in shock-proof material
- ② Cilindro con ampie alettature / Cylinder with large fins
- ③ Canna trattata chimicamente antiossidante / Cylinder surface chemically treated against oxidation
- ④ Pattini di guida in materiale autolubrificante / Large piston rings in self-lubricating material
- ⑤ Cuscinetti speciali di grandi dimensioni / Special oversized bearing
- ⑥ Motore elettrico in carcassa con protezione termica / Electric motor built in metal housing with thermal protector
- ⑦ Ventola di raffreddamento / Cooling fan
- ⑧ Carenatura antiurto / Shock-proof housing

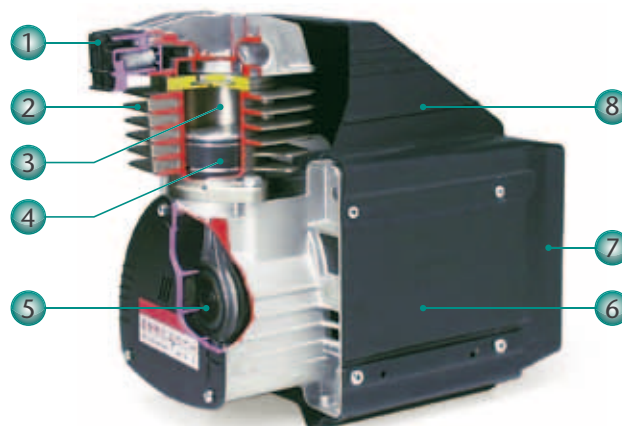


Caratteristiche costruttive - Technical features

Il dimensionamento corretto tra gruppo pompante e serbatoio, garantisce un ciclo di lavoro ottimale ed una vita superiore del compressore.

Per salvaguardare la purezza dell'aria si è scelto di verniciare internamente il serbatoio eliminando ogni possibilità di ossidazione e ruggine che comprometterebbero la funzionalità della macchina e ridurrebbero drasticamente l'efficienza del sistema.

The correct sizing between the pumping unit and the tank guarantees optimum performance and extended life of the compressor.

To safeguard the purity of the air supplied, the tank has also been painted internally to eliminate all possible traces of oxidation and rust, which would compromise the functionality of the machine and would drastically reduce the efficiency of the system.

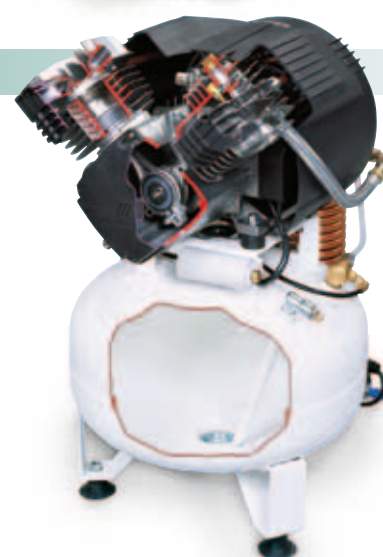

Sistemi di essiccazione - Drying systems

Essiccatore a sali:

- Ottimizzato il funzionamento della colonna e della rigenerazione dei sali
- Ottimizzato il raffreddamento dell'aria tramite refrigeratore di rame
- Filtro separatore acqua di condensa a ciclone con scarico automatico
- Punto di rugiada Dewpoint garantito 5°C con 40°C ambiente

Essiccatore a membrana:

- Essendo privo di componenti soggetti ad usura, l'essiccatore richiede una manutenzione minima
- Aria raffreddata mediante scambiatore in rame e radiatore alettato
- Dotato di prefiltro separatore dell'acqua di condensa con scarico automatico
- Punto di rugiada garantito: 5°C con 40°C ambiente


Absorption Dryer:

- Improved performances of the dryer/column and of the salt regeneration
- Improved cooling system through a new copper aftercooler
- Air/water cyclon separation pre-filter with automatic drain valve
- Dew point 5°C with 40°C environmental temperature


Membran Dryer:

- Since there are no components subject to wear, the dryer requires minimal maintenance
- Air cooled by copper heat exchanger and finned radiator
- With prefilter for drain condensate water with automatic discharge
- Guaranteed dewpoint: 5°C at 40°C ambient temperature


Essiccatore a sali Absorption dryer

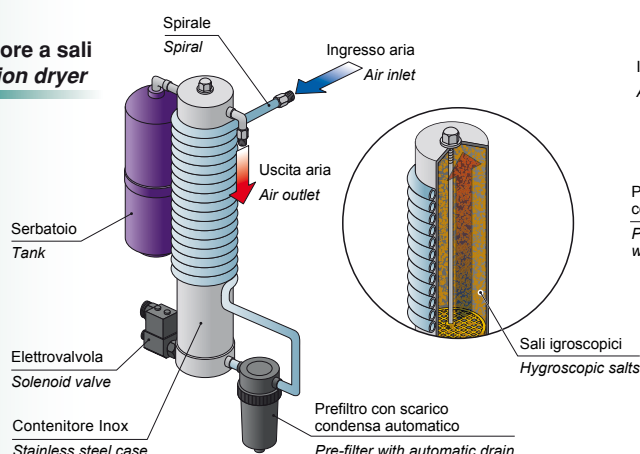

Essiccatore a membrana Membran dryer

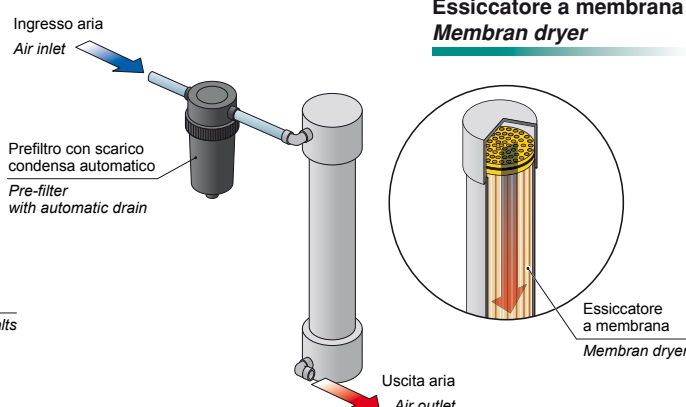

senza essiccatore / without dryer

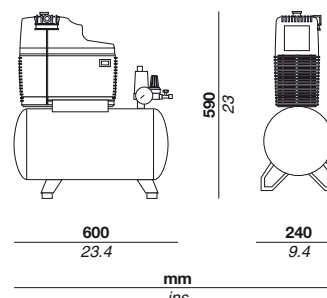


CE

Type	Kg	m ³
AIRMED 114-24	25	0.107
AIRMED 130-24	25	

Type	Volt/Hz	Cod.	€														
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
AIRMED 114-24	230/50/1△	1690010000	520,00	24	70	F 114	1	105	3.7	6,3	62	2.2	3,7	8	116	1	1450
AIRMED 130-24	115-220/60/1△		545,00	24	70	F 130	1	130	4.6	7,8	70	2.5	4,2	8	116	1	1700

senza essiccatore / without dryer

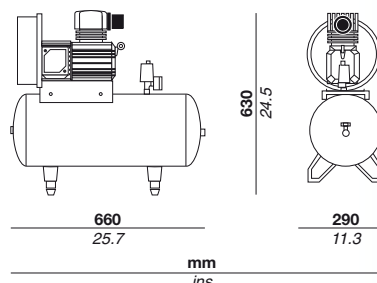


CE

Type	Kg	m ³
AIRMED 150-24	33	0.148
AIRMED 180-24	33	

Type	Volt/Hz	Cod.	€	a 5 bar / at 5 bar													
																	
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
AIRMED 150-24	230/50/1▲	1690040000	935,00	24	75	GSM 150	1	150	5.3	9	110	3.9	6,6	8	116	1,5	1400
AIRMED 180-24	115-220/60/1▲		980,00	24	75	GSM 180	1	180	6.3	10,8	130	4.6	7,8	8	116	1,5	1700

Compressori d'aria per uso medicale

Air compressors for medical applications

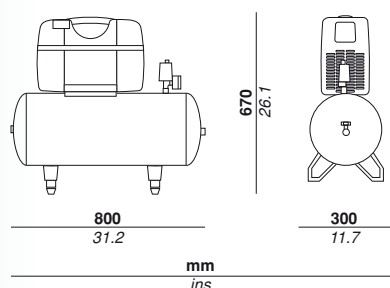

senza essiccatore / without dryer




Type	Kg	m ³
AIRMED 210-50	38	0.280
AIRMED 240-50	38	



CE

Type	Volt/Hz	Cod.	€	Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m ³ /h	ℓ/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	min-1
AIRMED 210-50	230/50/1△	1690580000	850,00	50	67	FB 210	2	200	7	12	120	4.2	7,2	8	116	2	1450
AIRMED 240-50	115-220/60/1△		940,00	50	67	FB240	2	240	8.5	14,4	145	5	8,7	8	116	2	1750

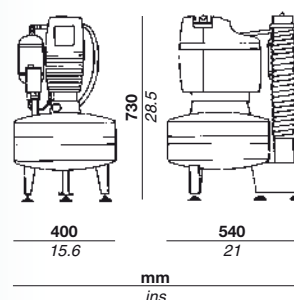

con essiccatore / with dryer




Type	Kg	m ³
DE 114	41	0.312
DE 130	41	



Type	Volt/Hz	Cod.	€	Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m ³ /h	ℓ/min	C.F.M.	m ³ /h	bar	psi	HP	min-1
DE 114	230/50/1△	1703803000	1.490,00	24	70	F 114	1	105	3.7	6,3	62	2.2	3,7	8	116	1	1450
DE 130	115-220/60/1△		1.560,00	24	70	F 130	1	130	4.6	7,8	70	2.5	4,2	8	116	1	1700

con essiccatore / with dryer

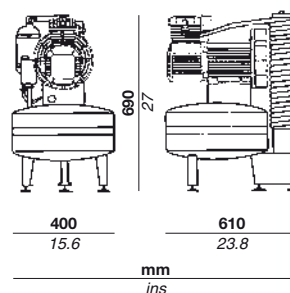

Type	Kg	m³
DE 150	45	0.312
DE 180	45	


CE

Type	Volt/Hz	Cod.	€														
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
DE 150	230/50/1▲	1703813000	1.840,00	24	76	GMS 150	1	150	5.3	9	110	3.9	6,6	8	116	1,5	1400
DE 180	115-220/60/1▲		1.910,00	24	76	GMS 180	1	180	6.3	10,8	130	4.6	7,8	8	116	1,5	1700

con essiccatore / with dryer



Type	Kg	m³
DE 24/204	51	0.312
DE 24/244	51	0.312
DE 50/204	60	0.383
DE 50/244	60	0.383
DE 50/254	62	0.383
DE 50/314	62	0.383

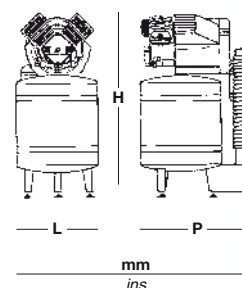


	L	P	H
DE 24/204	400/15.6	580/22.6	670/26
DE 24/244	400/15.6	580/22.6	670/26
DE 50/204	400/15.6	580/22.6	900/35
DE 50/244	400/15.6	580/22.6	900/35
DE 50/254	400/15.6	580/22.6	900/35
DE 50/314	400/15.6	580/22.6	900/35

CE

Type	Volt/Hz	Cod.	€						a 5 bar / at 5 bar									
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1	n°
DE 24/204	230/50/1▲	1703823000	2.125,00	24	76	VS 204	2 a V	200	7	12	150	5.3	9	8	116	2	1400	2
DE 24/244	115-220/60/1▲		2.215,00	24	76	VS 244	2 a V	244	8.6	14,6	180	6.4	10,8	8	116	2	1700	2
DE 50/204	230/50/1▲	1699922000	2.175,00	50	76	VS 204	2 a V	200	7	12	150	5.3	9	8	116	2	1400	3
DE 50/244	115-220/60/1▲		2.265,00	50	76	VS 244	2 a V	244	8.6	14,6	180	6.4	10,8	8	116	2	1700	3
DE 50/254	230/50/1▲	1699872000	2.235,00	50	76	VS 254	2 a V	250	8.8	15	188	6.6	11,3	8	116	2,5	1400	3
DE 50/314	115-220/60/1▲		2.335,00	50	76	VS 314	2 a V	300	10.6	18	190	6.7	11,4	8	116	2,5	1750	3

Compressori d'aria per uso medico silenziati

Silent air compressors for medical applications

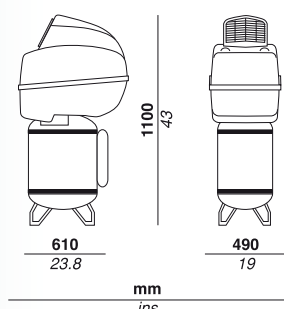

Type	Kg	m³
DE 50/204 silent	70	0.447
DE 50/244 silent	70	
DE 50/254 silent	72	
DE 50/314 silent	72	


con essiccatore / with dryer



- Configurazione con serbatoio verticale trattato internamente per salvaguardare la purezza dell'aria e garantire il sistema di essiccazione
 - Serbatoio dotato di ventose antivibranti in appoggio sul terreno
 - Gruppo bicilindrico a V progettato e costruito per il funzionamento senza olio
 - Carenatura in materiale plastico ad alta resistenza coibentato con fonoassorbente
 - Ventilazione forzata
 - Pressostato con protezione amperometrica e riarmo manuale
 - Regolatore di pressione e manometro di servizio
 - Contatore
- Vertical tank, treated internally to safeguard the purity of the air and guarantee the drying system
 - Tank with shock absorber feet
 - Double cylinder V pump, designed and manufactured to run without oil
 - Housing made by high strength plastic material, insulated with soundproofing material - Forced air cooling
 - Pressure switch with overload protection and manual reset
 - Pressure regulator and service pressure gauge
 - Hourmeter

CE

Type	Volt/Hz	Cod.	€							a 5 bar / at 5 bar							
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
DE 50/204 silent	230/50/1▲	1703832900	2.900,00	50	63	VS 204	2 a V	200	7	12	150	5.3	9	8	116	2	1400
DE 50/244 silent	115-220/60/1▲		2.990,00	50	63	VS 244	2 a V	244	8.6	14,6	180	6.4	10,8	8	116	2	1700
DE 50/254 silent	230/50/1▲	1699872900	3.040,00	50	65	VS 254	2 a V	250	8.8	15	188	6.6	11,3	8	116	2,5	1400
DE 50/314 silent	115-220/60/1▲		3.140,00	50	65	VS 314	2 a V	300	10.6	18	190	6.7	11,4	8	116	2,5	1750

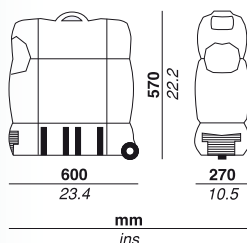

Type	Kg	m³
CARAT 114	22	0.110
CARAT 130	22	

senza essiccatore / without dryer




Type	Volt/Hz	Cod.	€	a 5 bar / at 5 bar													
																	
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
CARAT 114	230/50/1▲	1699860000	660,00	6	60	F 114	1	105	3.7	6,3	62	2.2	3,7	8	116	1	1450
CARAT 130	115-220/60/1▲		685,00	6	60	F 130	1	130	4.6	7,8	70	2.5	4,2	8	116	1	1700

senza essiccatore / without dryer



CE

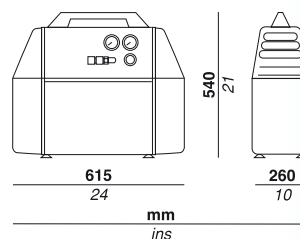


Type	Kg	m³
CARAT 106	34	0.170
CARAT 105	34	0.170

Type	Volt/Hz	Cod.	€							a 5 bar / at 5 bar							
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
CARAT 106	230/50/1△	1700180000	1.115,00	6	57	GMS 100	1	100	3.5	6	62	2.2	3,7	7	100	0,75	1450
CARAT 105	115-220/60/1△		1.165,00	6	57	GMS 105	1	105	3.7	6,3	65	2.3	3,9	7	100	0,75	1750

senza essiccatore without dryer



CE

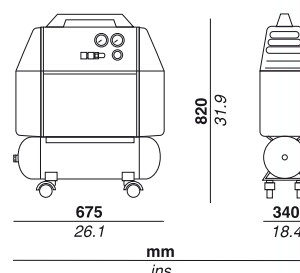


Type	Kg	m³
CARAT 120 R	44	0.195

Type	Volt/Hz	Cod.	€							a 5 bar / at 5 bar							
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
CARAT 120 R ☆□	230/50/1△	1690590000	1.350,00	24	57	GMS 100	1	100	3.5	6	62	2.2	3,7	7	100	0,75	1450
CARAT 144 R ☆□	115-220/60/1△		1.400,00	24	57	GMS 105	1	105	3.7	6,3	65	2.3	3,9	7	100	0,75	1750

con essiccatore / with dryer



CE

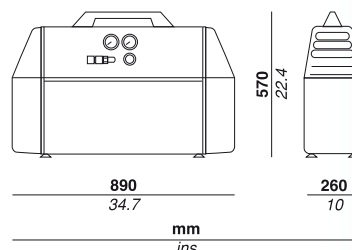


Type	Kg	m³
CARAT 106/E	48	0.170
CARAT 105/E	48	0.170

Type	Volt/Hz	Cod.	€							a 5 bar / at 5 bar							
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
CARAT 106/E	230/50/1△	1703500000	2.050,00	6	57	GMS 100	1	100	3.5	6	62	2.2	3,7	7	100	0,75	1450
CARAT 105/E	115-220/60/1△		2.100,00	6	57	GMS 105	1	105	3.7	6,3	65	2.3	3,9	7	100	0,75	1750

Compressori d'aria per uso medico supersilenziati

Supersilent air compressors for medical applications

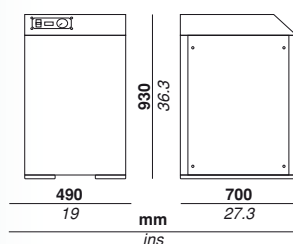


Tipo	Kg	m ³
NEW CARAT	110	0.330

con essiccatore / with dryer



New CARAT

- Filtro aria in materiale antiurto
- Cilindro con ampie alettature
- Canna trattata chimicamente antiossidante
- Pattini di guida in materiale autolubrificante
- Cuscinetti speciali di grandi dimensioni
- Motore elettrico in carcassa con protezione termica
- Ventilazione forzata tramite elettroventilatore centrifugo di raffreddamento
- Carenatura antiurto
- Essiccatore ad adsorbimento oppure a membrana senza manutenzione
- Contatore
- Air filter in shock-proof material
- Cylinder with large fins
- Cylinder surface chemically treated against oxidation
- Large piston rings in self-lubricating material
- Special oversized bearing
- Electric motor built in metal housing with thermal protector
- Electric centrifugal fan for better air cooling
- Shock-proof housing
- Absorption dryers or membrane dryer without maintenance
- Hourmeter

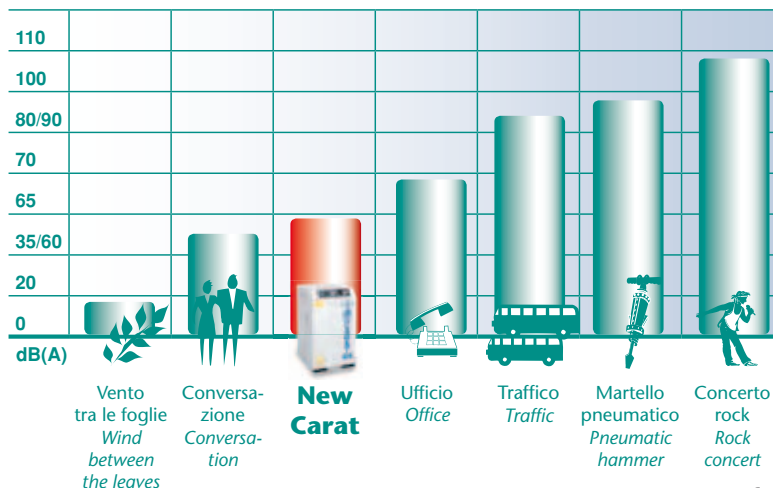

Type	Volt/Hz	Cod.	€														
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
NEW CARAT 150/ES	230/50/1	1703531000	3.350,00	24	55	GMS150	1	150	5.3	9	110	3.9	6,6	8	116	1,5	1400
NEW CARAT 150/EM	230/50/1	1682651000	3.745,00	24	55	GMS150	1	150	5.3	9	110	3.9	6,6	8	116	1,5	1400
NEW CARAT 204/ES	230/50/1*	1703561000	3.650,00	24	55	VS204	2 a V	200	7	12	150	5.3	9	8	116	2	1400
NEW CARAT 204/EM	230/50/1*	1682661000	4.025,00	24	55	VS204	2 a V	200	7	12	150	5.3	9	8	116	2	1400
NEW CARAT 254/ES	230/50/1*	1682671000	3.860,00	24	62	VS254	2 a V	250	8.8	15	188	6.6	11,3	8	116	2,5	1450
NEW CARAT 254/EM	230/50/1*	1682181000	4.235,00	24	62	VS254	2 a V	250	8.8	15	188	6.6	11,3	8	116	2,5	1450

ES = versione a sali / salt version


EM = versione membrana / membran version

* = versione 60 Hz disponibile su richiesta / 60 Hz version available upon request

con essiccatore / with dryer



CE

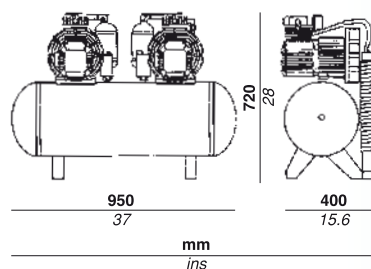


Type	Kg	m³
DET 300/E	80	0.742
DET 360/E	80	0.742

Type	Volt/Hz	Cod.	€									 a 5 bar / at 5 bar						
				Lt.	dB (A)			Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h			
DET 300/E	230/50/1▲	1703841000	3.440,00	50	79	2xGMS 150	1+1	300	10.6	18	220	7.8	13,2	8	116	1,5+1,5	1400	
DET 360/E	115-220/60/1▲		3.590,00	50	79	2xGMS 180	1+1	360	12.6	21,6	260	9.2	21,6	8	116	1,5+1,5	1700	

con essiccatore / with dryer



CE

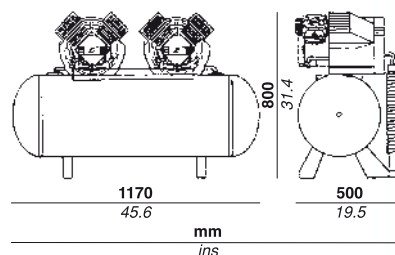


Type	Kg	m³
DET 400/E	130	0.742
DET 490/E	130	0.742

Type	Volt/Hz	Cod.	€	a 5 bar / at 5 bar													
																	
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
DET 400/E	230/50/1▲	1703851000	4.300,00	100	79	2xVS 204	2+2	400	14.1	24	300	10.6	18	8	116	2+2	1400
DET 490/E	115-220/60/1▲		4.480,00	100	79	2xVS 244	2+2	490	17.2	29,2	360	12.8	21,6	8	116	2+2	1700

con essiccatore / with dryer



CE

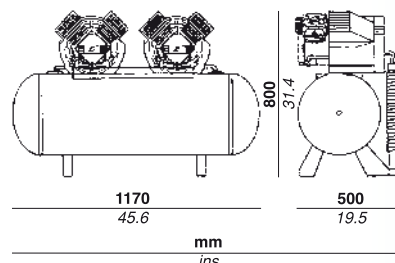

Type	Kg	m³
DET 500/E	130	0.742
DET 600/E	130	0.742

Type	Volt/Hz	Cod.	€	a 5 bar / at 5 bar													
																	
				Lt.	dB (A)	Grup./Pump	Cil.	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	ℓ/min	C.F.M.	m³/h	bar	psi	HP	min-1
DET 500/E	230/50/1▲	1697541000	4.470,00	100	76	2xVS 254	2+2	500	17.6	30	376	13.2	22,6	8	116	2,5+2,5	1400
DET 600/E	115-220/60/1▲		4.650,00	100	76	2xVS 314	2+2	600	21.2	36	380	13.4	22,8	8	116	2,5+2,5	1750

Legenda Symbols



	I Capacità serbatoio GB Tank capacity F Capacité réservoir	D Behälterkapazität E Capacidad calderín P Capacidade reservatório	NL Tankinhoud S Tank kapacitet DK Tankens kapacitet	SF Säiliön tilavuus RUS Ёмкость ресивера CN 儲氣罐容量
	I Pressione sonora (rilevata a 4 metri) GB Sound pressure (measured at 4 mt.) F Pression sonore (mesuré à 4 mètre)	D Schalldruck (Schallpegel in 4 m Abstand) E Presión sonora (detectada a 4 m de distancia) P Pressão sonora (detectada a 4 metro)	NL Geluidsdruk (gemeten op 4 meter afstand) S Ljudtryck (uppmätt på 4 m avstånd) DK Lyd tryk (målt i afstand på 4 m)	SF Äänenpaine (4 metrin etäisyydeltä mitattuna) RUS Звуковое давление (На высоте 4 метра) CN 聲壓 (4米距離)
	I Autolubrificato GB Selflubricated F Autolubrifié	D Ölfrei E Autolubricado P Auto-lubricado	NL Zelfsmerend S Självsmörjande DK Selvsurt	SF Itsevoiteleva RUS С автоматической смазкой CN 無油
	I Con essiccatore GB With air dryer F Avec sécheur	D Mit Trockner E Con secador P Com secador	NL Met droger S Med torkare DK Med tørreapparat	SF Kuivaajan kanssa RUS С осушителем CN 帶干燥器
	I Gruppo GB Pump F Groupe	D Aggregat E Bomba P Cabeçote	NL Pomp S Pump DK Enhed	SF Yksikkö RUS Насосный агрегат CN 機頭
	I Cilindri GB Cylinders F Cylindres	D Zylinder E Cilindros P Cilindros	NL Cilinders S Cylindrar DK Cylindre	SF Sylinterit RUS Цилиндры CN 中缸
	I Aria aspirata (1 m³ = 1.000 litri) GB Air displacement (1 cu. m. = 1.000 liters) F Air aspiré (1 m³ = 1.000 litres)	D Ansaugleistung (1 m³ = 1.000 Liter) E Aire aspirado (1 m³ = 1.000 litros) P Ar aspirado (1 m³ = 1.000 litros)	NL Inlaatlucht (1 m³ = 1.000 liter) S Cylindervolum (1 kb = 1.000 liter) DK Indsugel luft (1 m³ ~ 1.000 l)	SF Imetty ilma (1 m³ ~ 1.000 litraa) RUS Всасываемый воздух (1 куб.м - 1.000 литров) CN 排氣量 (1m³=1000升)
	I Aria resa GB F.A.D. F Débit	D Liefermenge E Caudal de aire P Ar entregado	NL Netto lucht opbrengst S Frittluftflöde DK Effektiv luft	SF Vapaa tuotto RUS Выброс воздуха CN 排氣量
	I Pressione massima di lavoro GB Max. working pressure F Pression maximum de fonctionnement	D Maximaler Arbeitsdruck E Presión máxima de trabajo P Pressão máxima de trabalho	NL Maximale bedrijfsdruk S Max. arbetstryck DK Maks. arbejdsryk	SF Maksimityöpain RUS Полное рабочее давление CN 最大工作壓力
	I Giri al minuto GB Rounds per minute F Tours par minute (min-1)	D Umdrehungen pro Minute E Revoluciones por minuto P R.P.M.	NL Toerental per minuut S Varv per minut DK Omdr./min.	SF Kierrosta minuutissa RUS Оборотов в минуту CN 每分鐘轉速
	I Peso lordo GB Gross weight F Poids brut	D Bruttogewicht E Peso bruto P Peso bruto	NL Bruttogewicht S Brutto vikt DK Bruttovægt	SF Bruttopaino RUS Вес брутто CN 毛重
	I Cubatura m³ GB Cubic meters F Cubage m³	D Kubikmeter E Metros cúbicos P Cubicagem m³	NL Kubieke meter S Kubikmeter DK Kubikmeter (m³)	SF Tilavuus m³ RUS Объем в кубометрах CN 體積
	I n° riuniti GB n° unit F Nbre de fauteuils	D Anzahl Zahnarztstühle E N.° sillones P N.° de Cadeiras	NL Aantal tandartsstoelen S Antal tandläkarstolar DK Antal behandlingsenheder	SF Hoitoyksikkömäärä RUS Число кресел CN 牙医坐椅数量
	I Prezzo € GB Price € F Prix €	D Preis € E Precio € P Preço €	NL Prijs € S Pris € DK Pris €	SF Hintä € RUS цена € CN 價格 €



I Con protezione termica automatica • GB With automatic thermal protection • F Avec protection thermique automatique • D Automatischer Thermo-Schalter • E Con protección térmica automática • P Com protecção térmica automática • NL Met automatische thermische beveiliging • S Med automatiskt överhettningsskydd • DK Med automatisk termisk beskyttelse • SF Automaattisella lämpösuojalla • RUS С автоматической тепловой защитой • CN 帶自動式熱保護器



I Con protezione termica a riarmo manuale • GB With manual reset thermal protection • F Avec protection thermique à réarmement manuel • D Thermo-Schalter mit manueller Rücksetzung • E Con protección térmica de restauración manual • P Com protecção térmica a rearme manual • NL Met thermische beveiliging met handmatige reset • S Med manuellt inställt överhettningsskydd • DK Med termisk beskyttelse med manuel tilbage stilling • SF Manuaalisesti nollattavalla lämpösuojalla • RUS С тепловой защитой с ручным сбросом • CN 帶手動式熱保護器



www.fiac.it

Sistema di gestione della qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Quality system certified according to
UNI EN ISO 9001:2008



FIAC SpA, nell'ottica di migliorare costantemente i prodotti, si riserva di aggiornare le caratteristiche presenti in questo catalogo senza preavviso. I requisiti dei prodotti sono indicati chiaramente. Le immagini sono puramente indicative.

To guarantee the continued improvement of our range of products, FIAC reserves the right to update the technical characteristics shown in this catalogue without prior warning. Specifications of products are clearly indicated. Photographs are for illustrative purposes only.



ANIMA®



Associazione Costruttori
Pompe e Compressori
Italian Association of Pump
and Compressor Manufacturers



9998842000

03/10 • Hi-Tech Media

FIAC Italy

FIAC Air Compressors S.p.A.
Via Vizzano, 23
40037 Pontecchio Marconi (Bologna) Italy
Tel.: +39 051 678 68 11
Fax: +39 051 84 52 61
fiac@fiac.it - www.fiac.it

FIAC UK

Wilkinson Star Ltd.
Shield Drive
Wardley Industrial Estate - Worsley
Manchester M28 2WD - England
Tel.: +44 (0) 161 793 8127
Fax: +44 (0) 161 727 8297
fiac.sales@wilkinsonstar.com
www.wilkinsonstar.com

FIAC China

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd.
8/F, Kam Sang Building
255-257 Des Voeux Road - Central Hong Kong
Tel.: +852 2868 1098
Fax: +852 2840 0303
info@fiac.com.cn

FIAC France

Domac Sarl
53, Route de Foëcy, Z.I. des Forges
18100 - Vierzon - France
Tél: +33 248530575
Fax: +33 24853057
info-contact@domac.fr

FIAC Brazil

FIAC Compressores de Ar do Brasil Ltda
Rua Jorge Fernandes Mattos n. 181
cep 14.808.162
Araraquara S.P. - Brasil
Tel.: +55 (16) 3334-7080 / 3334-7081
Fax: +55 (16) 3334-7089
fiac@fiacbrasil.com.br
www.fiacbrasil.com.br

FIAC Russia

FIAC Rus
B. Cherkhizovskaya, 24A
107553 Moscow-Russia
Tel.e Fax +7 495 9267806
info@fiak.ru
www.fiak.ru

FIAC IN THE WORLD